


ALMOFADAS DE TREINO DE SUTURA MULTICAMADAS


As almofadas de formação/prática de sutura multicamadas são constituídas por quatro (4) camadas, destinadas a representar a derme, camada subcutânea, linha média e fáscia transversa.

As incoerências de espessura derivam do processo de fabrico manual das mesmas, e fornecem uma variação na superfície de treino/sutura.

As almofadas devem ser mantidas em saco próprio (já fornecido) quando não estão a ser utilizadas.


As almofadas contêm óleos de silicone que podem dissolver-se ao longo do tempo e manchar superfícies porosas. Uma vez retiradas do saco, se necessário, as almofadas devem ser lavadas com água e sabão para remover o resíduo oleoso. Os resíduos de óleo de silicone podem ser limpos das superfícies com um detergente à base de fosfato e uma mistura de água. Evitar o contacto com a pele, olhos e superfícies porosas.

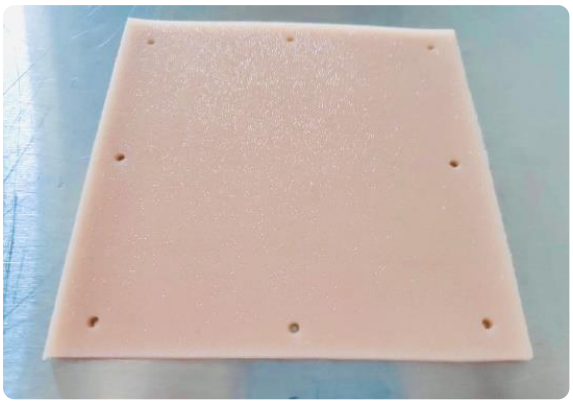

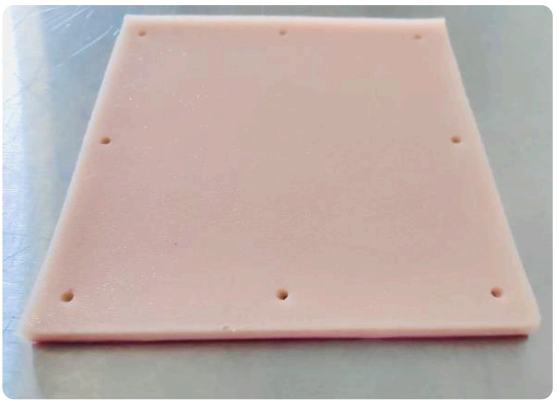

ALMOFADAS DE SUTURA DE ÓRGÃOS OCOS

Estas almofadas consistem numa única camada, destinada a representar um órgão oco. As incoerências de espessura derivam do processo de fabricação manual.

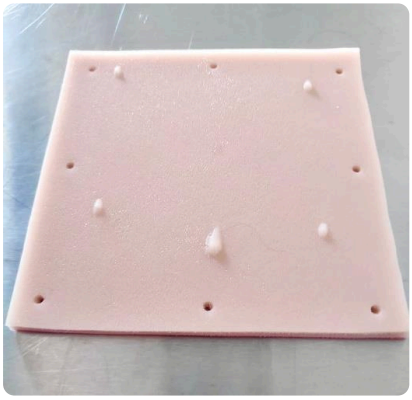

ALMOFADAS DE SUTURA CANINA

Estas almofadas são as mesmas que as utilizadas nas nossas suturas multicamadas normais, mas também apresentam mamilos e cicatriz umbilical, que são utilizados como pontos de referência no Simulador de Abdómen Canino.



BASE/SUPORTE DE TREINO DE SUTURA

A base é fornecida com duas inserções de esponja. A inserção da esponja sólida é para utilização com a Almofada de Sutura Multicamadas. A esponja que refaz apenas o perímetro da estrutura destina-se a ser utilizada com a Almofada de Sutura de Órgãos Ocos, e pode ser armazenada dentro da base quando não estiver a ser utilizada.

As ventosas no fundo da base aderem de forma mais eficaz a uma superfície de trabalho lisa.

A unidade base e as esponjas devem ser limpas com água e sabão. Os produtos químicos destruirão o plástico e/ou esponja.

Utilização: instalar as almofadas de treino de sutura, puxando os orifícios das almofadas por cima dos pinos da base.