


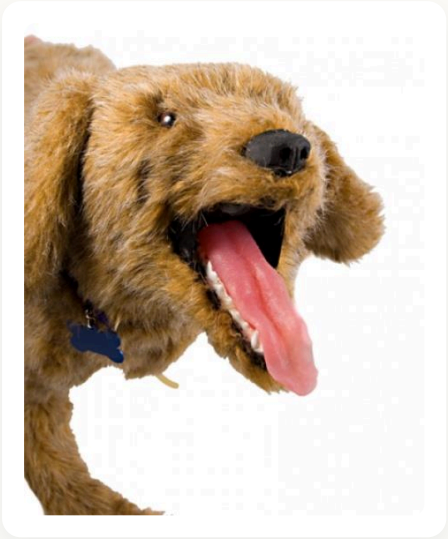

CARACTERÍSTICAS E INSTRUÇÕES — RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA DE EMERGÊNCIA

A respiração boca-a-boca de ressuscitação pode ser executada simplesmente soprando para o nariz. Notará que o peito se eleva devido a uma via aérea especial equipada com uma válvula de sentido único.

Deve ser sempre utilizado um escudo facial e o nariz deve ser limpo com álcool etílico a 70% a cada utilização (entre cada aluno). É altamente recomendado que cada aluno utilize o seu próprio escudo facial descartável ao soprar para o focinho.

COMPRESSÕES TORÁCICAS

Coloque o Jerry em decúbito lateral direito. Pegue no membro torácico esquerdo com ambas as mãos, dobre o cotovelo e rode o ombro para trás até ao peito; o local de compressão é onde o cotovelo entra em contacto com o corpo. Coloque aí a base plantar da sua mão e comece as compressões (siga os protocolos da FMV-ULHT para compressões e RCP).

PULSO

Simplesmente ligue o tubo de pulso ao conector que sai da parte inferior das costas. Comece a bombear para sentir o pulso realista no membro traseiro esquerdo. O tubo foi propositadamente tornado longo para dar ao instrutor a oportunidade de testar os alunos.

ENTUBAÇÃO

Inserir o tubo endotraqueal nas vias respiratórias utilizando os métodos descritos pelo docente em aula. Por favor, notar a presença da epiglote. A via aérea está concebida para receber um tubo endotraqueal de 6,0 a 9,0 mm. Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água para inserir o tubo endotraqueal. O pulmão para a função de entubação está permanentemente instalado no simulador, não há necessidade de o mudar. Para o fazer, colocar o Jerry em decúbito lateral direito e abrir a aba do pêlo para expor o pulmão. O pulmão descartável deve ser ligado ao tubo sem o adaptador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O Jerry é cuidadosamente feito à mão e cada unidade é inspeccionada antes do envio. O seu Jerry chegou num estado pronto a ser utilizado. Todos os produtos são feitos manualmente e terão uma aparência ligeiramente diferente.

PÊLO

Escovar suavemente o pêlo antes de cada utilização para evitar o emaranhado. Esteja ciente de que uma certa quantidade de descamação irá ocorrer; isto é normal. Escovar apenas o suficiente para desembaraçar quaisquer nós no pêlo. Além disso, escovar qualquer pêlo que esteja preso no velcro. O pêlo no velcro impedirá que ele se fixe correctamente. Ao fechar o velcro, junte todas as extremidades até que nenhum velcro esteja a aparecer. Pressione firmemente na costura para fixar o seu fecho. Uma vez que muitas mãos irão manusear regularmente o Jerry, recomenda-se que se verifique periodicamente se existem manchas. Para pequenas manchas no pêlo, basta enxaguar a área manchada com uma pequena quantidade de sabão suave ou detergente e água. Utilizando uma esponja ou pano para esfregar suavemente a mancha e enxaguar com água fria (não se esqueça de remover completamente o sabão). Escovar suavemente enquanto o pêlo ainda está molhado e deixar secar completamente ao ar.

VIA AÉREA

Para mudar os pulmões e limpar as vias respiratórias:

1) Levantar a aba do pêlo no lado esquerdo do peito.
2) Desligar a via aérea retirando a válvula de passagem da ligação do adaptador. Elimine o pulmão mas não deite fora o adaptador.
3) Segurar a tubagem imediatamente acima do adaptador e com a outra mão remover o adaptador.
4) Segurando a tubagem com uma mão, empurre a mesma até ao nariz para se libertar e começar a avançar. O nariz (focinho) está ligado a esta tubagem; por isso, não o puxe. Empurre a tubagem para cima até que alguma porção possa ser vista do lado do nariz. Depois pode agarrar em ambos (tubagem e nariz) e puxar, até que toda a unidade fique exteriorizada.
5) Mergulhar a unidade de tubagem/nariz numa solução de lixívia para 1 galão de água durante um mínimo de 10 minutos após cada aula. Recomendamos que mergulhe durante a noite para obter os melhores resultados. Nota: a cor do nariz pode desbotar com repetidas limpezas.
6) Substituir a unidade nariz/tubo através do orifício no focinho, ligar o adaptador e ligar um novo pulmão ao outro lado do adaptador.
7) Deslizar o pulmão para a respetiva bolsa.

CONSELHOS

1) O simulador Jerry é um dispositivo de treino de RCP e nunca deve ser utilizado como brinquedo ou por crianças para fins de brincadeira.

2) Ao transportar o Jerry, utilizar a mala de transporte fornecida. O Jerry deve ser inserido na mala de transporte com as patas viradas para as pegas. Se não utilizar a mala de transporte adequada, o Jerry deve ser embalado nos braços como um cão de verdade.

3) Nunca manuseie o modelo pela boca, cabeça, cauda ou membros. Isto resultará em danos.

4) Ao executar a respiração de salvamento, o aluno nunca deve levantar a cabeça do Jerry para encontrar a sua boca. O aluno deve baixar a cabeça até ao nível do focinho de Jerry. Uma flexão excessiva da cabeça não só causará uma deterioração desnecessária do modelo, como também criará uma dobra na tubagem do pulmão, tornando impossível que o ar insufle o pulmão.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se estiver a ter problemas com o seu simulador Jerry, aqui estão algumas áreas a verificar duas vezes:

1) Se o peito não encher, verifique a via aérea para se certificar de que a válvula de sentido único está devidamente colocada no tubo da via aérea. Certifique-se de que não a rompeu e que esta está devidamente ligada. Se o ar ainda não entrar, verificar a tubagem no pulmão para se certificar de que não se dobrou.

2) Através do uso repetido, o nariz afasta-se ligeiramente do focinho. Se o empurrar simplesmente para trás e não funcionar, escove qualquer pêlo que possa ter ficado preso no velcro do nariz, depois abrir a aba do pêlo no pulmão e puxar suavemente o tubo que está preso ao nariz. Isto deverá prender/coaptar o nariz no lugar.

3) Tentámos tornar o pulso simulado no Jerry tão realista quanto possível. Tenha em mente que, tal como num cão real, pode ser difícil localizar o ponto de pulsação no interior do membro pélvico esquerdo. O aluno deve procurar o pulso como parte do seu treino.