
Torre Anestésica + *Flush* de Oxigénio

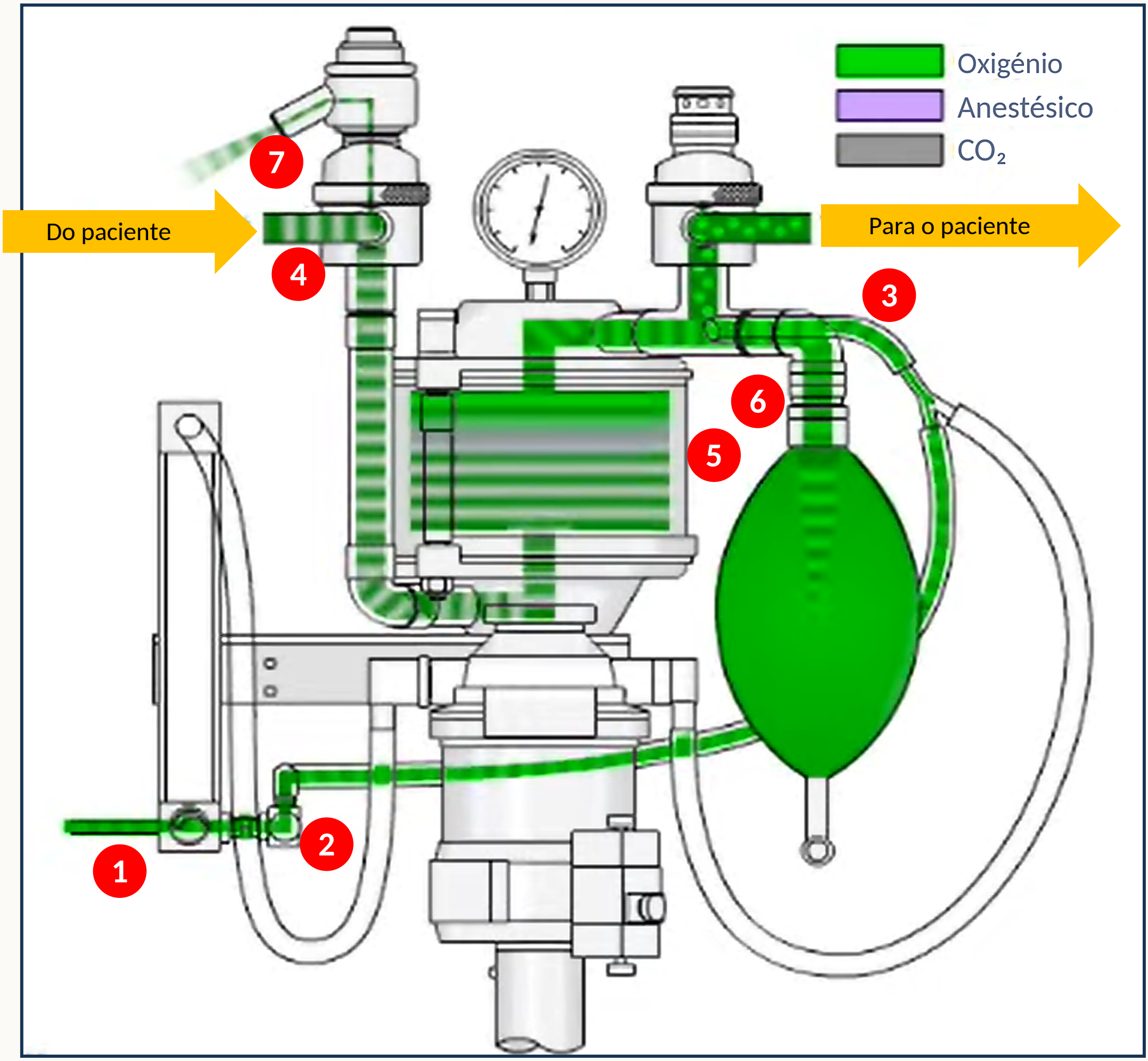

CIRCUITO CIRCULAR – *FLUSH* OXIGÉNIO

1. O oxigénio entra na máquina na parte inferior do **Fluxómetro**
2. Premindo o botão na **Válvula de *Flush* de Oxigénio**, o circuito desvia-se do Vaporizador
3. O oxigénio entra no **Balão Reservatório**, tubo de inalação, e reencaminha-o para o paciente
4. O paciente exala/expira, e o gás residual entra na máquina, através do tubo de expiração
5. O gás residual entra no recipiente de absorção de CO_2 (**Canister**) que o remove
6. O oxigénio sem CO_2 entra no Balão Reservatório novamente, passa pelo tubo de inalação e volta ao paciente, reciclando o oxigénio
7. Uma pequena quantidade de gás residual sai da válvula **Popoff**, mantendo a pressão na máquina e nos pulmões do paciente

Prof. Ana Rocha 2026 - ana.rocha@ulusofona.pt
Imagens: Midmark Animal Health – https://www.youtube.com/watch?v=13QZN1aqrbw&t=91s&ab_channel=MidmarkAnimalHealth